

ScanAfia XL hoitosänky

Tyylikkyyttä ja tilaa arvostavalle
– ominaisuuksista tinkimättä



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Sängyn makuutasen leveys 120 cm tilaa ja turvallisuutta arvostavalle
2. Safe Working Load (SWL) 285 kg mahdollistaa myös suurikokoisten potilaiden hoidon
3. Laaja korkeudensäätöalue mahdollistaa potilaan omatoimisuuden ja helpottaa hoitajan ergonomiaa

Erikoismittainen ScanAfia XL hoitosänky on suunniteltu isompia ja painavampia käyttäjiä silmälläpitäen. Sänky soveltuu erinomaisesti hoitokoteihin, joissa potilaiden keskikoko on kasvanut. Erikoismittaisen sängyn leveys on 120 cm ja suurin potilaspaino 250 kg. Suurten kaksoispyörien ansiosta sänky on helposti liikuteltava, mutta silti erittäin tukeva.

Hoitosängyillä voit sisustaa laadukkaasti ja tyylikkäästi toiminnallisuudesta tinkimättä yhdessä esimerkiksi Lojerin pöytä- ja tuolituotteiden kanssa. Massiivipuiset valkotammit sängynpäädtyt varmistavat tavallisia sänkyjä pidemmän elinkaaren. Pitkäikäisyyden takeena on korkealuokkainen epoksipintakäsittely, sillä ainoana valmistajana raepuhallamme teräsosat ennen maalausta. Sängyssä on turvallinen 24V pienjännitejärjestelmä, ja sähkömoottorit ja ohjauksyksiköt ovat roiskevesisuojaattuja. Tuote on palotestattu SL1-mukaisesti.

LOJER® For easy care

Tekniset tiedot ja ominaisuudet


Kokonaisleveys kaiteilla:	130 cm
Kokonaispituus:	217 cm
Korkeuden säätöalue	34 - 82 cm (Ø150 mm kaksoispyörät) 32 - 80 cm (Ø125 mm kaksoispyörät; optio)
Suositeltava patjakoko	205 cm x 118 cm x 13 cm
Kokonaispaino (sis. kaiteet)	145 kg
Pyörät	Ø150 mm keskuslukittavat kaksoispyörät ja suuntapyörä
Safe Working Load (SWL)	285 kg
Selkäosan säätö	70°
Reisiosan säätö	30°
Pohjeosan säätö	11°
Anti-Trendelenburg säätö	20°
Muut vakio-ominaisuudet	Massiivipuiset Scandic valkotammipäädyt kaksoislukitteiset puulaidat lukitusnapilla 2 kpl käsiohjain selkäosan manuaalinen lasku anti-Trendelenburg integroitu paikka kohottautumistelineelle ja nesteentotelineelle
Sähköjärjestelmä	24V
MDR-asetuksen mukainen CE-merkintä	Kyllä
Valmistusmaa	Suomi

Tehdasasenteiset optiot:

- Akkukäyttö
- Ø125 mm kaksoispyörät
- Törmäspyörät

Muut lisävarusteet:

- Kohottautumisteline
- Nousutuki
- Nesteentoteline yhden käden pikasäädöllä
- Lukuvalaisin
- Kaiteen lisäkoroke
- Pehmustettu kaidesuoja
- Virtsapussiteline
- Sängyn lukituspaneeli (potilaalta voidaan estää toimintoja)
- Käsiohjainteline

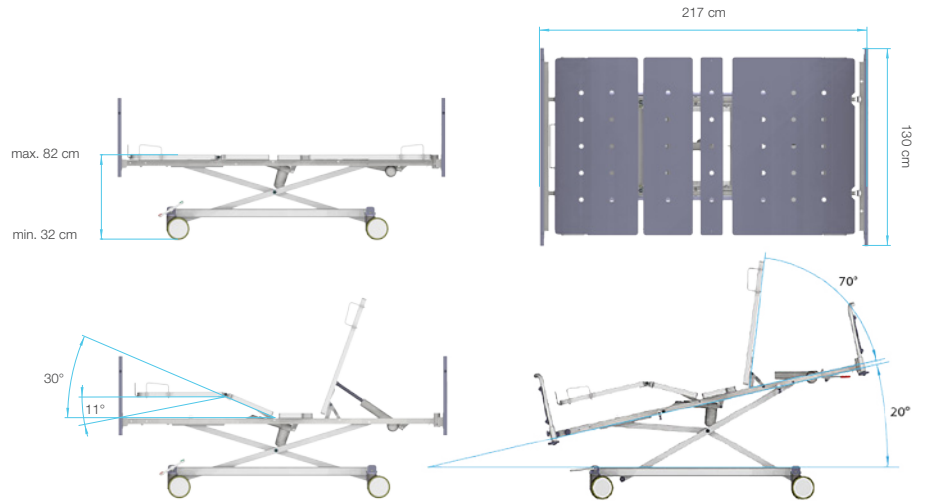

LOJER® For easy care