

ScanAfia XHS -hoitosänky



Kuvan tuotteessa
lisävarusteita

2



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Suuri kuormitettavuus (SWL) 260kg
2. Matala alakorkeus (alk. 32 cm) lisää potilaan omatoimisuutta ja turvallisuutta
3. Selkäosan liukumekanismi estää potilaan valumisen ja parantaa käyttömukavuutta

Laadukas ScanAfia XHS -hoitosänky on terveydenhuollon ammattilaisen ykkösvalinta. Tuoteperheen uusin sänky on suunniteltu monenlaiseen hoitoympäristöön, jossa arvostetaan helppokäyttöisyyden ja luotettavuuden lisäksi muotoilua sekä ulkonäköä.

Sängyn erittäin laaja korkeudensäätöalue edistää potilaan turvallista kuntoutumista ja hyvinvointia sekä helpottaa hoitohenkilökunnan työtä. Peräti 260 kg kuormitettavuudesta huolimatta ScanAfia XHS on kevyt ja vakiona olevien 125 mm pyörien ansiosta helposti liikuteltava hoitosänky.

Mallisto

- ScanAfia XHS 280/290: kaksiosainen makuutaso (205 x 80/90 cm), jossa sähkötoiminen korkeuden ja selkäosan säätö
- ScanAfia XHS 480/490: neliosainen makuutaso (205 x 80/90 cm), jossa sähkötoiminen korkeuden, selkäosan, reisosan ja pohjeosan säätö

LOJER® For easy care


Tekniset tiedot	
Kokonaisleveys kaiteilla:	92 cm tai 102 cm
Makuutason leveys	80 cm tai 90 cm
Kokonaispituus	217 cm Pitkä malli: 227 cm
Korkeuden säätöalue	Min. 32 cm - max. 82 cm (pyöräkoosta ja mallista riippuen)
Suosittelava patjakoko	205 x 78/88 x 13 cm
Kokonaispaino ilman kaiteita	109/111 kg (XHS 280/290), 116/118 kg (XHS 480/490)
Pyörät:	Ø125 mm keskuslukittavat pyörät ja suuntapyörä
Selkäosan säätö	70°
Reisiosan säätö (vain 4-toiminen malli)	30°
Pohjeosan säätö (vain 4-toiminen malli)	11°
Muut vakio-ominaisuudet	Käsiohjain kaksoislukitteiset massiivipuukaiteet lukitusnapilla integroitu paikka kahdelle kohottautumistelineelle ja nesteenantotelineelle selkäosan liukumekanismi ja hätälasku leposidekiinnitysvalmuis sängyn päädyt: Classic-pyökki tai Classic-koivu
Kuormitettavuus (SWL):	260 kg
Sähköjärjestelmä	24V
CE -merkintä	Kyllä
Valmistusmaa	Suomi

Tehdasasenteiset optiot:

- Anti-Trendelenburg
- Akkukäyttö
- Ø125 mm kaksoispyörät
- Ø150 mm kaksoispyörät
- Törmäyspyörät
- Sängyn pääty: valkotamminen Scandic
- Erikoispituinen (jatkettava 215 cm) malli

Muut lisävarusteet:

- Kohottautumisteline
- Nousutuki
- Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä
- Lukuvalaisin
- Kaiteen lisäkoroke
- Pehmustettu kaidesuoja
- Virtsapussiteline
- Luku- ja ruokailutaso sängyn laitojen päälle
- Sängyn lukituspaneeli (potilaalta voidaan estää toimintoja)
- Käsiohjainteline

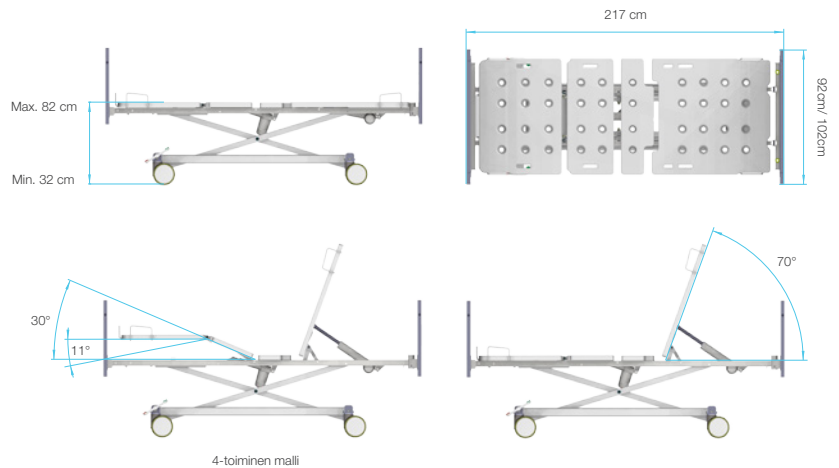

© Lojer Group 2020. Kaikki oikeudet pidätetään | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com.

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa.